






3M™ Kind Removal Silicone Tape  
3M™ 硅胶压敏胶带



3M™ Transpore™ White  
压敏胶带



3M™ Transpore™  
网纹易撕胶带



3M™ Micropore™  
透气胶贴



3M™ Multipore  
弹性柔棉宽胶带



3M™ Durapore™  
丝绸布胶带



产品	型号	最小包装	适用范围	片/盒	盒/箱
	3343*	1ml, 棉棒式	造瘘口, IV导管周围皮肤, 失禁, 红臀, 胶带反复粘贴, 引流管周围的皮肤以及放疗皮肤的保护	25	4
	*3344*	1ml, 棉片式	造瘘口, IV导管周围皮肤, 失禁, 红臀, 胶带反复粘贴, 引流管周围的皮肤以及放疗皮肤的保护	25	4
	*3345*	3ml, 棉棒式	造瘘口, IV导管周围皮肤, 失禁, 胶带反复粘贴, 引流管周围的皮肤以及放疗皮肤的保护	25	4
	3346	28ml, 喷雾式	造瘘口, 失禁, 红臀, 胶带反复粘贴, 引流管周围的皮肤以及放疗皮肤的保护		12

\* 一次性无菌包装

### 订购信息:

产品	型号	尺寸	卷/盒	盒/箱	
	2770-1	2.5cmx5.0m	12	10	
	2770-2	5.0cmx5.0m	6	10	
	2770S-1	2.5cmx1.3m	100	5	
	2770S-2	5.0cmx1.3m	50	5	
	2775-0(单卷独立盒装)	1.9cmx5.0m	12	10	
	2775-1(单卷独立盒装)	2.5cmx5.0m	12	10	
2775-2(单卷独立盒装)	5.0cmx5.0m	6	10		
	1534CG-0	1.25cmx9.14m	24	10	
	1534CG-1	2.5cmx9.14m	12	10	
	1527C-0	1.2cmx9.1m	24	10	
	1527C-1	2.4cm x9.1m	12	10	
	1527C-2	4.8cm x9.1m	6	10	
	1527C-3	7.2cmx9.1m	4	10	
	1530C-0	1.2cmx9.1m	24	10	
	1530C-1	2.4cmx9.1m	12	10	
	1530C-2	4.8cmx9.1m	6	10	
	1530C-3	7.2cmx9.1m	4	10	
	T8027C-0	1.2cmX8m	48	10	
	T8027C-1	2.4cmX8m	24	10	
	T8030C-0	1.2cmX8m	48	10	
	T8030C-1	2.4cmX8m	24	10	
	2733-12.5	1.25cmx5m	36	4	
	2733-2.5	2.5cm x5m	24	4	
	2733-37.5	3.75cmx5m	12	4	
	2733-50	5.0cmx5m	12	4	
	2733-75	7.5cmx5m	6	4	
	2733-100	10cmx5m	6	4	
	1538-0	1.25cmx9.14m	24	10	
	1538-1	2.5cmx9.14m	12	10	
	1538-2	5.0cmx9.14m	6	10	
	1538-3	7.6cmx9.14m	4	10	
	1581/1581B	2.54cmx4.57m	30	1	
	1582/1582B	5.08cmx4.57m	36	1	
	1583/1583B/1583R/1583W	7.62cmx4.57m	24	1	
	1584/1584B	10.2cmx4.57m	18	1	
	1586	15.2cmx4.57m	12	1	
	3M™ 医用输液贴	3M™ 输液固定贴	70mmx40mm	400	10

欲了解更多信息, 请联系当地3M医疗产品事业部专业客户经理

**3M**  
3M中国有限公司

总办事处  
上海市长宁区仙霞路99号尚嘉中心16楼 邮编: 200336  
电话: 021-62753535 传真: 021-62752343



VSG4003772 胶带手册

**3M** 科技  
改善生活™

# 聚“胶”创新 携手共进



## Gentle to Skin 针对脆弱皮肤



### Transport White 压敏胶带

- 无纺人造丝背衬，舒适透气
- 可纵横双向随意撕取
- 低致敏弱酸性粘胶，专为脆弱幼嫩皮肤设计
- 持续粘性稳定

### 3M™ 硅胶压敏胶带

- 专利硅胶，粘性温和持久
- 无痛撕除，不粘毛发，适合婴幼儿的娇嫩肌肤
- 清洁状态下可反复粘贴



## General Securement 基础固定



### Transpore 网纹易撕胶带

- 全层打孔聚乙烯背衬，透明便于观察
- 初始粘性强，透气性好
- 可纵横双向随意撕取

### Micropore 透气胶带

- 无纺布背衬，轻薄柔软，皮肤顺应性好
- 透气性佳
- 粘性温和，湿性环境下粘性稳定




## Strong Adhesive 针对重型管路




### Durapore 丝绸布胶带


- 人造丝绸背衬，耐用抗拉伸
- 持续粘性强
- 可纵横双向随意撕取

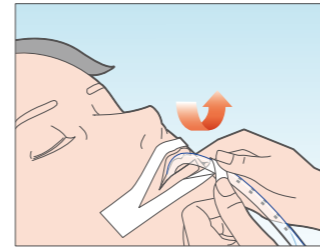

取15cm胶带，纵向撕成2等分并保留末端5cm不要撕开。交叉处黏贴与脸颊处并与嘴角保留1cm距离。

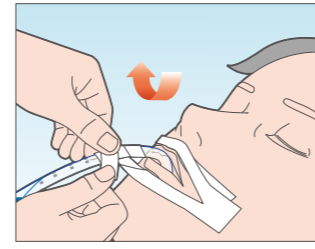


撕开胶带上侧固定在嘴唇上方，另一侧绕管再撕取一条同规格的胶带，再对侧进行同样操作。

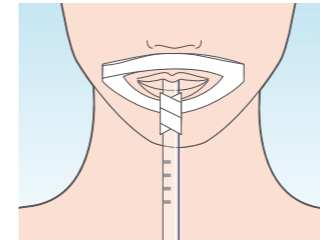


完成效果如图

### Multipore 弹性柔棉宽胶带


- 弹力棉布背衬，背衬强韧
- 粘性持久
- 离型纸印有刻度，方便按需剪裁

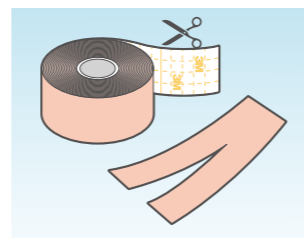

用剪刀剪取长度为7cm的胶带，并纵向剪成人字形

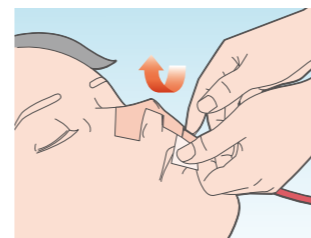

从中间撕开离型纸，并将未分叉处贴于鼻翼位置。然后用分叉处的两条胶带从两边分别绕管。

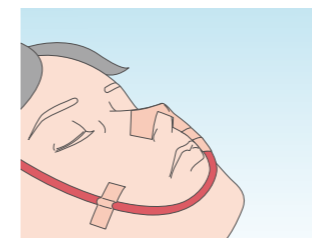

再剪一段胶带，将鼻胃管用高举平台法固定于脸颊处。

## 其他特殊固定



### 输液固定贴

- 透明背衬，便于观察，舒适透气
- 不粘伤口的吸收垫
- 低敏性粘胶，粘性稳定
- 预留揭除条，使用方便

### Coban 自粘绷带

- 无纺涤纶背衬，表面涂以高分子聚合物，背衬含聚酯弹力丝
- 舒适透气，顺应性强，良好的延展性
- 无粘胶成分，可自我粘合，但不粘皮肤或导管
- 按需裁剪，方便使用
- 推荐用于静脉输液加强固定，夹板固定，头部等不规则部位包扎，烧伤及术后部位加压包扎等



## 推荐在使用黏胶产品之前，用3M液体敷料对皮肤进行保护！

- 不含酒精 无刺激 零疼痛
- 专利配方 长效72小时保护
- 规格多样 适合不同临床应用



3M™ Cavilon™ 液体敷料